



Sillas de ruedas eléctricas

Gama 2.008



QUICKIE®

INNOVATE.™
BUILD FOR THE FUTURE

QUICKIE®

F35

La F35 ha sido diseñada con múltiples detalles para conseguir la máxima comodidad para sus usuarios, y favorecer la accesibilidad en su entorno.



Características standard

Reposabrazos regulables en anchura, altura y profundidad, que proporcionan mayor comodidad

Respaldo ajustable en altura y desmontable

Mando de control retraíble en paralelo para favorecer el acceso a mesas

Reposapiés desmontables y abatibles hacia dentro

Quitando las baterías y el respaldo la F35 se puede plegar de una forma muy compacta, pudiendo transportarse muy cómodamente en el maletero de un coche

Color: azul

Anchura asiento: 43 cm

Sus **baterías de 50 Amph** de serie y sus potentes motores permiten a la F35 estar mucho más tiempo disponible para su uso, y en óptimas condiciones.

Su **cargador de 8 Amph** permite recargar las baterías en un breve periodo de tiempo.



Modelo con respaldo reclinable

Opciones F35

- Subebordillos
- Mando acompañante
- Mando usuario-acompañante
- Mando mentoniano
- Reposapiés elevables
- Respaldo reclinable
- Ruedas traseras macizas





Rumba

Robusta, plegable y ajustable



Características standard

Angulo de respaldo ajustable entre 0° y 30°

Respaldo regulable en altura en tres posiciones: 43, 46 y 49 cm

Reposabrazos regulables en altura

Anclajes de seguridad para el transporte de la silla en un vehículo

Baterías de 50 Amph

Colores: Rojo brillante, azul brillante, negro brillante y gris plata

2 tallas de asiento: 42x43 cm, 48x43 cm

Antivuelcos retraíbles hacia dentro. Los antivuelcos se pliegan cuando hacen tope contra un obstáculo, por lo que la longitud de la silla se ve reducida en 5 cm. Esto es especialmente útil para tener cabida en ascensores.



La Rumba permite un **plegado muy compacto**, ya que el respaldo es fácilmente desmontable, las baterías están alojadas en dos cajas para que resulten más fáciles de manejar, y la estructura se pliega para ocupar el mínimo espacio.

Opciones Rumba

- Luces e indicadores
- Sube bordillos
- Control mentoniano
- Reposapiernas elevables
- Respaldo ajustable en tensión

- Asiento y respaldo anatómicos
- Cabeceros
- Soporte de bastones
- Mesa

QUICKIE®

F40

F40, la silla de ruedas eléctrica que ha sido creada para la vida moderna, gracias a su diseño práctico y estilizado. El resultado es una silla ligera y fuerte al mismo tiempo, gracias a su estructura fabricada en aluminio.



Presenta una serie de características pensadas para garantizar la comodidad de uso, tanto en interiores como en exteriores:

Baterías de 40 Amph*

Reposabrazos ajustables en altura

Reposapiés desmontables

Mando de control abatible para facilitar el acceso a mesas, que se puede montar a la derecha o a la izquierda y ajustar según las necesidades particulares del usuario

Diseño ergonómico del respaldo en forma de "Y"

Colores: Rojo, azul y negro

Anchura asiento: 33, 36, 41, 43 y 46 cm

Para las anchuras de 33 y 36 cm las baterías son de 30 Amph

Opciones F40

- Subebordillos
- Luces e indicadores
- Control mentoniano
- Control de usuario y acompañante
- Control sólo para acompañante
- Respaldo reclinable o partido
- Reposapiés elevables
- Reposacabezas



Samba Lite2

Su especial diseño, combinado con la estructura tubular hacen de la Samba Lite2 una silla muy robusta, homologada para usuarios de hasta **140** kgs.

Samba[®]LITE



Características standard

Baterías de 60 Amph de gel

Angulo del respaldo ajustable en 5 posiciones, entre -3° y 9°

Basculación del asiento ajustable en 3 posiciones (0°, 3° y 6°)

Profundidad del asiento ajustable entre 40 y 50 cm

Apoyabrazos regulables en altura entre 18 y 28 cm

Ruedas delanteras de 9"

Desmontable, y transportable. Con sólo apretar un botón se desmonta en dos partes, muy fáciles de transportar

El asiento se puede colocar en dos posiciones en la estructura, para ajustar el centro de gravedad que mayor estabilidad proporcione al usuario

Colores: Gris perla, rojo brillante y azul



Desmontable

En dos partes muy fáciles de transportar

Opciones Samba Lite2

- Luces e indicadores
- Sube bordillos
- Mando de acompañante, de usuario y acompañante
- Reposapiés elevables
- Asiento y respaldo anatómico
- Velocidad de 10 km/h
- Reposacabezas
- Cinturón
- Soporte bastones
- Mesa

QUICKIE®

Samba2

La silla de ruedas eléctrica Samba2 proporciona importantes beneficios terapéuticos, ya que puede adoptar infinidad de posiciones, permitiendo al usuario cambiar de postura y de puntos de apoyo en cualquier momento.



Desmontable

En dos partes muy fáciles de transportar



Con **sólo girar** los correspondientes pomos, el grado de basculación y reclinación se regulan fácilmente



Características standard

Basculación del asiento y respaldo entre -5° y 20°

Reclinación del respaldo entre -10° y 40°

Baterías de 60 Amph de gel

Ruedas delanteras de 9"

Asiento ajustable en anchura entre 35 y 50 cm

Asiento ajustable en altura entre 45 y 51 cm

Asiento ajustable en profundidad entre 38 y 48 cm

Apoyabrazos regulables en altura entre 18 y 28 cm

Centro de gravedad ajustable para una óptima estabilidad en cualquier posición

Suspensión ajustable en función del peso del usuario, para un máximo confort en la conducción

Desmontable en dos partes de cómodo manejo para su transporte

Colores: Gris perla, rojo brillante y azul

Opciones Samba2

- Subebordillos
- Luces e indicadores
- Control mentoniano
- Control de usuario y acompañante
- Control sólo para acompañante
- Asiento y respaldo anatómico
- Reposapiés elevables
- Reposacabezas
- Basculación eléctrica
- Reclinación eléctrica
- Reposapiés elevables eléctricamente

Medidas Samba2 niños

- Anchura de asiento regulable de 30 a 40 cm
- Profundidad de asiento regulable de 30 a 40 cm
- Reposapiés pediátricos a 70° o 90°



F55 y F55S

Atractiva y robusta estructura tubular

Provista de una atractiva y robusta estructura tubular, y suspensión en las ruedas traseras, la silla F55 permite además los siguientes ajustes:

- Reposabrazos regulables en anchura y altura
- Respaldo regulable en profundidad
- Asiento de posición ajustable y basculante (regulable manualmente)
- Suspensión en las ruedas traseras ajustable

Características standard

Llantas de aleación

Baterías de muy fácil acceso

Anchura de asiento de 41 cm, regulable mediante reposabrazos hasta 51 cm

Profundidad de asiento 44 cm, regulable de 41 a 51 cm

Disponible en verde foresta y morado brillante



La versión F55S permite alcanzar mayor velocidad (hasta 10 km/h) e incorpora luces e indicadores

Modelo con accesorios

Opciones F55

- Luces e indicadores
- Sube bordillos
- Mando de acompañante, de usuario y acompañante
- Reposapiés elevables
- Reclinación y basculación eléctrica

QUICKIE®

Groove

Una silla de ruedas que se adapta perfectamente a las necesidades del usuario, a su estilo de vida y a su entorno. Con la electrónica más avanzada del mercado, y un diseño modular que permite ir adaptando la silla a sus propios cambios.



3 tipos de asiento

Asiento Rehab standard (normal o anatómico)

Asiento ajustable Perfect Fit

Asiento de gran confort RECARO

3 módulos de función

Basculación manual

Basculación eléctrica

Elevación de asiento

3 tipos de tracción

Tracción delantera

Tracción central

Tracción trasera

Intercambiable



Groove

3 tipos de tracción

Por primera vez en una sola silla los usuarios y prescriptores pueden elegir entre 3 tipos de tracción

- tracción delantera
- tracción central
- tracción trasera

en función de cuál se adapta mejor a su estilo de vida y al entorno en el que se mueve. Todas ellas son combinables con cualquiera de los tipos de asiento, módulos de función, mandos...etc.

Tracción delantera y trasera intercambiables

La misma base puede utilizarse como tracción trasera o como tracción delantera con solo darle la vuelta y reprogramar el mando. Así de sencillo, se puede modificar la tracción si el usuario lo requiere, o valorar de forma rápida cuál es la silla que mejor se adapta a sus necesidades.

Suspensión en todas las ruedas. Máxima estabilidad

La suspensión en las ruedas tractoras proporciona una mayor sensación de estabilidad y control incluso a velocidades altas. En el caso de la base con tracción central las 6 ruedas tienen suspensión completamente independiente. De esta forma se asegura que todas las ruedas estén siempre en contacto con la superficie incluso en los terrenos más irregulares o subiendo obstáculos



Por primera vez se puede elegir la tracción que mejor se adapta a su estilo de vida y a su entorno

QUICKIE®

Groove

Tipos de asiento

Asiento Rehab

Rehab es el asiento básico de Groove. Permite la adaptación de sistemas de sedestación Jay. Dispone de 3 tipos de inclinación de respaldo:

- Fijo, regulable con herramientas
- Manual, regulable mediante pomo
- Eléctrico




Asiento Rehab

Asiento Comfort

Asientos y respaldos antómicos disponibles en varias tallas para una total comodidad.

Asiento Perfect Fit

El sistema Perfect Fit es **ajustable en altura, anchura y profundidad de forma totalmente independiente, en el asiento y el respaldo**. De esta forma se pueden acomodar a cambios del usuario, asimetrías, crecimiento...etc. Dispone de una gran variedad de soportes de ayuda al posicionamiento, como soportes de tronco, de cadera, rodilla...etc.

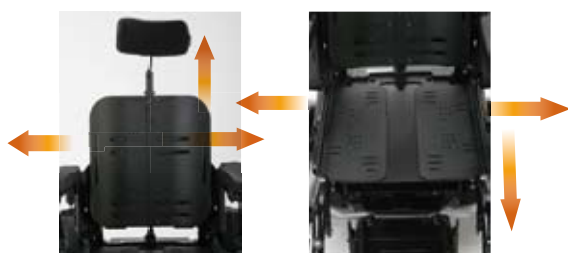

Asiento Perfect Fit



Asiento Comfort

Asiento Recaro

Aquellos usuarios que deseen gran comodidad pueden elegir los asientos tipo Recaro. Con diferentes versiones, incluyendo la inclinación eléctrica



Asiento Recaro

3 módulos de función

- Basculación manual
- Basculación eléctrica
- Elevación de asiento

Se pueden añadir o retirar en cualquier momento, y se pueden pedir en la configuración inicial de la silla o añadirlos posteriormente a medida que el usuario los vaya necesitando






Groove

Electrónica de última generación

Adaptable a los cambios del usuario

La silla Groove ofrece una gran variedad de mandos, desde los más básicos (QC), pasando por los Rehab QR, hasta los mandos especiales como botones pulsadores, soplido, mentón...La electrónica está preparada para que en cualquier momento se puedan añadir o cambiar nuevos elementos y controles.

Además se puede adaptar al perfil de conducción de cada usuario muy fácilmente con el programador para PC y el programador manual.

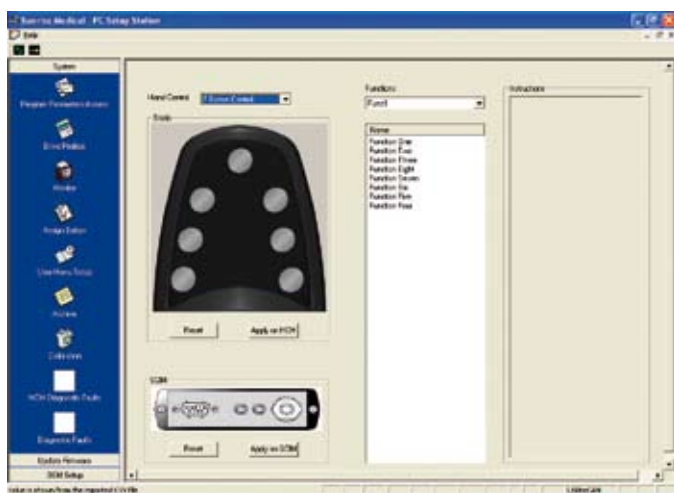

Programador de PC para adaptar perfiles de conducción

Control de entorno por IR (opcional)


El scanner de infrarojos va incluido en la pantalla. De esta forma es muy sencillo incorporar y programar el control de entorno para poder manejar desde el mando la TV, DVD, persianas domotizadas...

Software actualizable

El software de la electrónica del mando se puede actualizar descargando la última versión desde Internet directamente al mando.

Mandos personalizables

Mediante una sencilla programación se pueden asignar las funciones más habituales a los botones del mando que resulten más cómodos y más accesibles para el usuario. (Esto no es posible en mandos básicos QC)

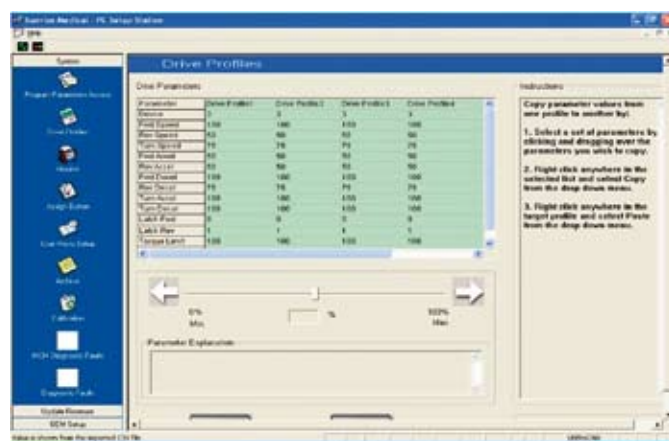

Programador para personalizar el mando

Par intuitivo de los motores

El par de los motores es intuitivo, de forma que aplica más potencia a velocidad baja, y menos potencia a velocidad más alta (como las marchas de un coche). De esta forma se reduce el consumo de baterías, se consigue una gran maniobrabilidad, y la silla sube mejor los bordillos




Pantalla con scanner de infrarojos


Con control de entorno por infrarrojos (opcional)

QUICKIE®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

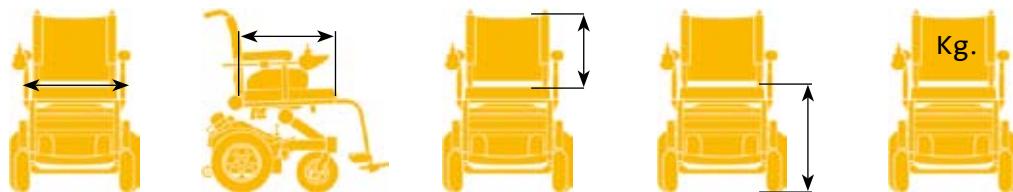

	43 cm	43 cm	47-49,5 cm	52 cm	Kg.
F35	43 cm	43 cm	47-49,5 cm	52 cm	63 kg
Rumba	42,48 cm	43 cm	43,46,49 cm	50 cm	75 kg
F40	33,36,41,43,46 cm	40,45 cm	43 cm	50 cm	70 kg
Samba Lite2	35-50 cm	40-50 cm	38,43,48 cm	45 cm	83 kg
Samba2	35-50 cm	38-48 cm	38-50 cm	45 a 51 cm	83 kg
F55	41 cm	44 cm	55 cm	52 cm	110 kg
Groove tracción trasera	30-61 cm	30-56 cm	38-60 cm	43-49 cm	152 kg
Groove tracción delantera	30-61 cm	30-56 cm	38-60 cm	43-49 cm	155 kg
Groove tracción central	30-61 cm	30-56 cm	38-60 cm	42-48 cm	197 kg

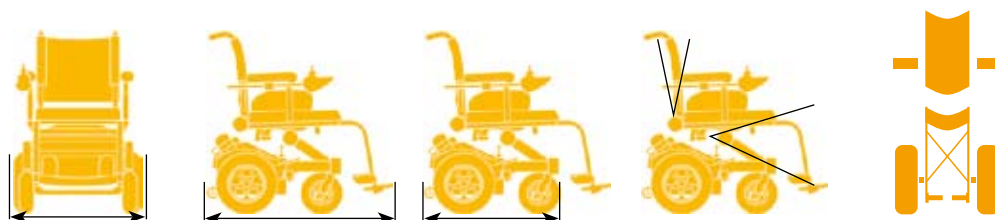

F35	60 cm	106 cm	83 cm	n/a	35 cm
Rumba	57,63 cm	102 cm	84 cm	Reclinación fija: 0° a 30°	35 cm
F40	53-64 cm	104 cm	75 cm	n/a	35 cm
Samba Lite2	64 cm	104 cm	82 cm	Reclinación ajust: -3° a 9° Basculación ajust: 0° a 6°	n/a
Samba2	64 cm	104 cm	82 cm	Reclinación ajust: -10° a 40° Basculación ajust: -5° a 20°	n/a
F55	64 cm	110 cm	84 cm	n/a	n/a
Groove tracción trasera	62 cm (ruedas 13") 64 cm (ruedas 14")	118 cm	86 cm	Reclinación ajust: -3° a 12° Basculación ajust: 0° a 9°	n/a
Groove tracción delantera	62 cm (ruedas 13") 64 cm (ruedas 14")	111 cm	88 cm	Reclinación ajust: -3° a 12° Basculación ajust: 0° a 9°	n/a
Groove tracción central	62 cm (ruedas 13") 64 cm (ruedas 14")	110 cm	95 cm	Reclinación ajust: -3° a 12° Basculación ajust: 0° a 9°	n/a

	Baterías	Pendiente	Radio de giro	Peso max usuario
F35	50 Amph	10°(18%)	60 cm	120 kg
Rumba	50 Amph	10°(18%)	85 cm	125 kg
F40	40 Amph	10°(18%)	84 cm	120 kg
Samba Lite2	60 Amph	10°(18%)	90 cm	140 kg
Samba2	60 Amph	10°(18%)	90 cm	120 kg
F55	56 Amph	10°(18%)	87 cm	127 kg
Groove tracción trasera	74 Amph	10°(18%)	100 cm	182 kg
Groove tracción delantera	74 Amph	10°(18%)	70 cm	182 kg
Groove tracción central	74 Amph	10°(18%)	50-64 cm	182 kg



Sunrise Training and Education Programmes

KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga Vizcaya



CE Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
www.sunrisemedical.es

INNOVATE.™
BUILD FOR THE FUTURE